

Make Better Beauty

**DUAL
SONIC**

說明書

(Luxury / Professional 公用)



Make Better Beauty

JION MEDITECH

www.jionmeditech.com

1. 產品介紹	3
2. 產品樣式	3
3. 產品構成	4
4. 產品外觀和名稱	5
5. 產品充電	6
6. 顯示幕標識	7
7. 提示標識	8
8. 專用機頭分離與安裝	9
9. 專用機頭樣式	10
10. 使用時注意事項	11,12
11. 注意事項	13,14
12. 產品保管方法	14
13. 使用前準備事項	15,16
14. 使用方法	17,18,19,20
15. 問題解答	21,22,23,24
16. 產品保修	25
17. 備忘錄	26 Page

• 產品介紹

DUALSONIC 使用的是高能聚焦超聲波技術, 對皮膚表面無創傷性, 用於改善肌膚, 重塑臉型的美容儀器, 有改善皺紋, 提拉緊致肌膚的效果。

DUALSONIC 的工作原理是利用高頻率的脈衝作用於圓弧形的超聲波陶瓷上而產生高能聚焦超聲波。

這種超聲波可以把能量聚焦在一個位置, 產生熱能從而起到管理皮膚的作用。


超聲波可作用於皮膚的SMAS層, 使膠原蛋白和彈力纖維得到恢復和再生, 從而起到改善皮膚皺紋和提拉緊致肌膚的效果。

※ 使用本產品前請務必詳細閱讀使用說明書, 充分瞭解本產品的性能和使用方法後再進行操作使用

• 產品樣式

使用目的	電池	等級模式	等級模式	能量強度	能強度	使用時間	顏色
皮膚 美容儀器	離子鋰電池 (3.6V 3350mAh)	5V 2000mA	- FACE ▶ 3.0 ▶ 4.5 ▶ DUAL • EYE ▶ 1.5	• FACE 1 Line(20dots) • EYE 1Hz(1dot/sec) 2Hz(2dots/sec) 3Hz(3dots/sec)	• Dualsonic Professional - FACE : 5等級 - E Y E : 5等級 • Dualsonic Luxury - FACE : 3等級 - E Y E : 3等級	• 1次使用時間 ▶ 15~20分鐘 • 可連續使用時間 ▶ 1小時30分	• Dualsonic Professional - Gold • Dualsonic Luxury - Silver


• 產品構成

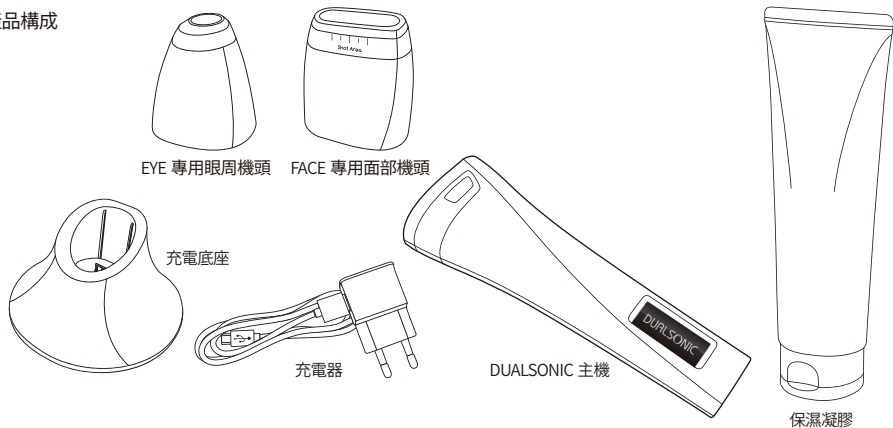


► 主機1個, 專用面部機頭 1個, 專用眼周機頭 1個, 充電底座 1個, USB線 1根, 充電接頭 1個, 保濕凝膠1個



- ▶ 充電時顯示幕上會顯示充電標識, 充電標識會反復閃爍, 充滿時會顯示100%。
- ▶ 充電量會在顯示幕上顯示, 數秒後會自動消失。
- ▶ 顯示幕上標識消失時, 按下啟動鍵會重新顯示。
- ▶ 長按啟動鍵標識會一直顯示在顯示幕上。

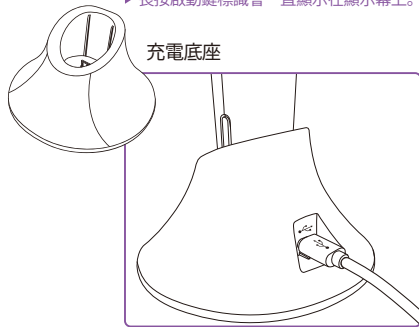


- ▶ 充電底座連接充電器後可以進行充電。
- ▶ 產品的充電量會顯示在顯示幕上。

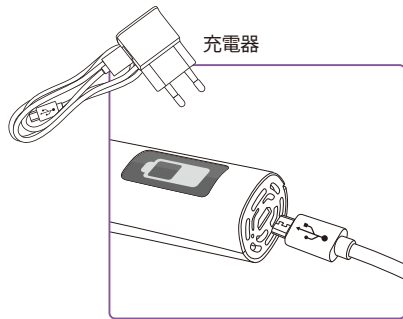


- ▶ 產品直接連接充電器可以充電。
- ▶ 產品充電量會顯示在顯示幕上。

※ 產品(儀器或充電底座)的充電埠與充電器連接時需要確認是否正確連接, 錯誤的連接會導致儀器產生故障。


顯示幕標識

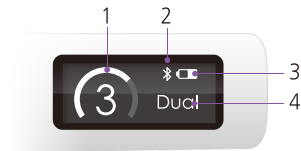

臉部機頭連接UI

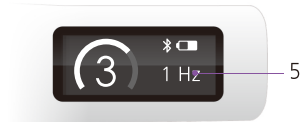

眼周機頭連接UI

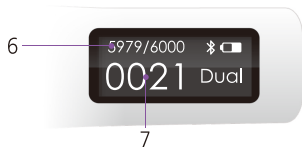

• 儀器主體的顯示幕標識介紹

1. 能量等級標識

- ▶ 能量強度標識(Pro:1~5等級 / Lux:1~3等級)
- ▶ 儀器電源OFF時會儲存能量等級

2. 藍牙標識

- ▶ 電源開啟後60秒會顯示連接標識
- 1) 連接後會一直顯示標識
- 2) 60秒內沒有連接的情況, 按下電源鍵會取消連接待機

3. 電池標識

- ▶ 剩餘電量標識1~5(等級)



4. 模式標識

- ▶ 模式標識 (3.0 or 4.5 or Dual)

5. 照射間隔標識(使用眼周機頭時顯示)

- ▶ 1秒的照射間隔標識(1Hz or 2Hz or 3Hz)

6. 機頭剩餘次數標識


- ▶ 機頭可以使用的剩餘次數標識(使用時減少一次)
- ▶ 右側數量標識為購買時的機頭可以使用的總數量(固定)

7. 使用次數標識


- ▶ Ready時顯示使用次數
- ▶ 每使用100次會有提示音提示

**機頭的情況確認提示**


- ▶ 機頭出現異常時提示
- ▶ 分離機頭後消失

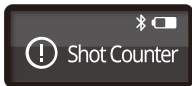**機頭次數確認提示**


- ▶ 機頭使用次數全部消耗時提示
- ▶ 會反復出現3秒後提示更換機頭

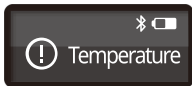**確認機頭次數提示**

- ▶ 主機與機頭溫度達到一定溫度時會顯示
- ▶ 經過特定時間後會消失

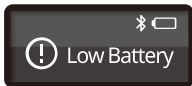**電池放電提示**


- ▶ 儀器可以正常開機,但是無法運行
- ▶ 會反復出現3秒後消失

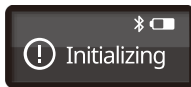**機頭初始化提示**


- ▶ 待機時機頭無法初始化時提示
- ▶ 會反復出現3後消失

**相同位置重複使用時提示**

- ▶ 會在相同位置重複使用時提示
- ▶ 會反復出現3秒後消失

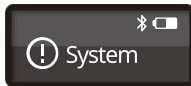**系統狀態提示**

- ▶ 會在儀器出現異常時提示
- ▶ 電源 OFF 時消失

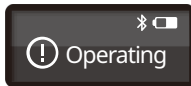**機頭初始化提示**

- ▶ 運行時機頭初始化失敗時提示
- ▶ 會反復出現3秒後消失
(分離機頭後重新安裝)


• 機頭分離/安裝的注意事項

- ▶ 根據各照射部位不同, 選擇使用適合的機頭。(全臉/集中管理)
- ▶ 眼周使用時選擇眼周機頭效果會更好
- ▶ 機頭不同會在顯示幕上顯示使用次數




- ▶ 分離機頭時需要按下分離鍵
比起按住分離鍵直接分離機頭,
按住分離鍵後左右輕微晃動(45度)
分離機頭會更加輕鬆。
- ▶ 確認安裝時能量盒與主機的連接部位是否正確後安裝,
安裝是否正確會顯示在顯示幕上。

• 機頭安裝標識

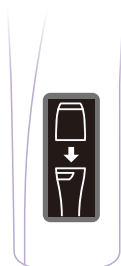

機頭沒有安裝時會
在顯示器上提示

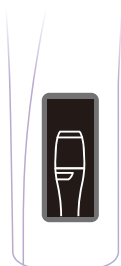

機頭正確安裝後會
顯示在顯示幕上

※不區分臉部、眼周機頭, 顯示幕會顯示相同畫面

• 臉部機頭

改善較深的皺紋和增加彈力與提拉下垂的
筋膜層，有塑造臉型的效果



- ▶ 能量強度：1~5等級 (Lux:1~3 等級)
- ▶ 照射間隔：1次 20DOT
- ▶ 基本次數：6000次 (Lux:3000次)
(實際次數會根據實際情況有所變動)
- ▶ 照射方式：線型方式 (1次20DOT)
- ▶ 使用方法：短按啟動鍵會照射20DOT，
完成時移動到下一個照射部位。
- ▶ 工作溫度：常溫 (機頭內部液體不可以結冰，
需要常溫保管) (參考14P產品保管方法)



• 眼周機頭

眼周與狹窄區域照射時使用眼周機頭會
有更好效果



- ▶ 能量強度：1~5等級 (Lux:1~3 等級)
- ▶ 照射間隔：1Hz~3Hz (1秒內照射次數)
(ex: 3Hz > 1秒內照射3次)
- ▶ 基本次數：60000次 (Lux:30000次)
(實際次數會根據實際情況變動)
- ▶ 照射方式：1DOT
- ▶ 使用方法：按住啟動鍵後一邊移動一邊使用
- ▶ 工作溫度：常溫 (機頭內部液體不可以結冰，
需要常溫保管) (參考14P產品保管方法)



- 產品使用時維持角度


機頭內有液體，儀器尾部（有USB充電埠的部位）向上（以儀器為準向上20~160度之間）的狀態下與肌膚緊密貼合後使用。機頭內部的液體需要接觸能量盒表面才可產生超聲波能量傳遞到肌膚，儀器尾部向下的情況，液體無法接觸到機頭表面，導致能量無法傳遞到肌膚。



正確的使用方式



錯誤的使用方式

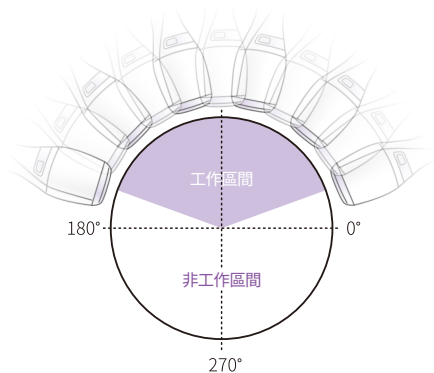

• 使用時注意事項

1. 使用前

- ▶ 使用本儀器前的3天內不可以使用其他對皮膚有刺激的產品
- ▶ 使用前請用洗面乳等產品充分的清洗面部
- ▶ 洗臉後請去除臉部的殘餘水分

2. 使用時

- ▶ 如果不慎照射到眼睛或眼球會導致失明等嚴重的眼球損傷，請不要在眼睛或眼球還有嘴唇及周邊使用本儀器
- ▶ 有填充物或脂肪移植的部位不可以使用本儀器
- ▶ 使用時一定要充分塗抹保濕凝膠後在進行使用，塗抹保濕凝膠後儀器要緊貼皮膚進行使用，如果未能緊貼皮膚使用會對皮膚造成損害等，也有可能留下疤痕。如若不慎使皮膚產生燙傷等情況，應終止照射後對相應部位進行冷敷，塗抹燙傷膏
- ▶ 調節到適合自己皮膚的強度進行使用，不要在相同位置重複使用，如若在相同位置重複使用會誘發燙傷等

- ▶ 使用中絕對不可以分離機頭與主機，會導致儀器產生故障
- ▶ 如若和其他人共用產品，需要給儀器接觸皮膚的部位進行消毒處理，防止交叉感染等
- ▶ 使用眼周機頭時為了防止在相同位置重複照射，一定要邊移動邊使用。
- ▶ 避免使用時儀器尾部向下
- ▶ 非防水產品，洗臉或沐浴時不可以使用

3. 使用後

- ▶ 身體產生異常時立即終止使用，但產生眩暈時可參考說明書或與總公司聯繫
- ▶ 使用後照射部位可能會產生紅腫現象（一般會在幾個小時內消失）
- ▶ 使用後不可以汗蒸或泡澡
- ▶ 使用後一周內不可以做去除角質等
- ▶ 照射部位如若發癢，不可以抓撓和大力觸碰



注意

1. 禁止將儀器使用在規定的範圍之外，超出使用範圍是引發事故的原因
2. 不可以同時使用其他美容儀器和溫熱儀器
3. 禁止在浴室、廚房、車內等溫度高的場所使用和保管本儀器，會使儀器產生故障縮短使用壽命
4. 長時間未使用本儀器，再次使用時請先詳細確認使用注意事項後在次使用本儀器
5. 使用時要遠離其他美容儀器，電視機等其他電子產品，不要在一個電源插排上插入過多插頭
6. 不要在產品上放置重物，水，飲料，液體等
7. 拔出電源插頭時請保持手部乾燥，不可以用濕手或沾有水分的手觸碰電源插頭
8. 禁止將其他儀器的配件混用於本產品，必須使用本產品的專用配件
9. 避免衝擊，以防產生故障。
10. 禁止使用尖銳鋒利的物品接觸本儀器，可能導致產品故障
11. 禁止用於有傷的部位或還在痊癒中的部位，全身或局部有皮膚疾患的情況，禁止使用本產品
12. 禁止使用在有金屬性物質的部位
13. 不要隨意改造儀器



警告：不適用於以下人士

1. 兒童和孕婦
2. 開放性傷口和腫大的疤痕
3. 重症毛囊性青春痘，痤瘡，粉刺
4. 使用部位有金屬或填充物
5. 可吸收的植入物
6. 移植過醫用器械等（人工心臟起搏器，移植型心臟電擊器，移植型醫療電子刺激器，移植型電力排尿抑制器等會受到電波影響的移植型醫療器械等）
7. 正在接受傷口治療或有全身或者局部皮膚疾患的人群



危險

1. 體內帶有移植人工心臟起搏器等移植型醫療器械人群
2. 人工心肺機等維持生命用醫療器械人群
3. 心電圖監視儀等佩戴型醫療器械人群
4. 體內含有金屬，塑膠，矽膠等
注意除了上述內容外，私自進行控制或調整儀器的操作會引起危險輻射的洩露

使用前請詳細的閱讀使用說明書，瞭解「安全注意事項」後正確的使用本儀器。使用說明書裡標記的關於安全的重要事項與內容，必須遵守並正確操作本儀器。

關於錯誤的處理和使用的危險程度分為以下3點

※ 根據PL法，以下內容須在說明書中強制性列明

-  **危險** 如果無視這個標識的內容進行錯誤的使用會導致死亡或者重傷
-  **警告** 如果無視這個標識的內容進行錯誤的使用可能會導致死亡或重傷
-  **注意** 如果無視這個標識的內容進行錯誤的使用可能會導致受傷或者財物損失

※ 如若消費者沒有遵守使用說明書裡的安全注意事項，導致財產、身心等受到損害，本公司概不負責

• 產品保管方法

- ▶ 每次使用後清潔掉殘餘凝膠，儀器表面用紙巾或柔面進行清潔
- ▶ 避免主機與機頭掉落 (容易破損)
- ▶ 長時間沒有使用時主機，機頭，充電器分開保管
- ▶ 長時間沒有使用時如果想再次使用需要先確認是否可以正常使用
- ▶ 保管在避免直接光線照射的地方
- ▶ 化學藥品，氣體等危險的地方不適合保管
- ▶ 機頭內部有液體，避免結冰，需要保管在常溫下 (0°C 以下50°C 以上的地方不適合保管.)
- ▶ 避免接觸腐蝕性氣體，濕氣

STEP 1



洗臉後清潔殘餘水分

STEP 2




準備產品

STEP 3




在照射前，請清潔及抹乾面部後，塗上充足的DUALSONIC Blooming 保濕凝膠。請確保面部不會太乾及有充足的保濕凝膠，如有需要，可塗抹多一些。

STEP 4

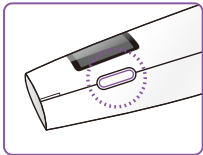


按住顯示幕右側電源按鈕3秒以上開機

STEP 5

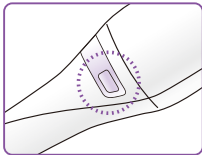

短按啟動鍵調節能量強度，
長按啟動鍵調節模式 Dual/4.5/3.0

STEP 6

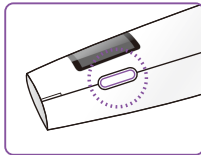


按下電源鍵開啟運行模式

STEP 7



儀器表面緊貼肌膚表面後維持正確的使用方式效果會更加明顯(參考11P)

STEP 1

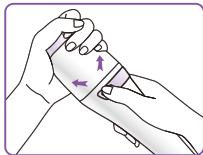


臉部機頭分離時按住背面
分離鍵左右輕微晃動機頭
後分離

STEP 2




眼機頭安裝時機頭與
主機需要正確連接

STEP 3

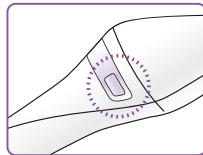

短按啟動鍵調節能力強度，
長按啟動鍵調節照射間隔
(1Hz/2Hz/3Hz)

STEP 4

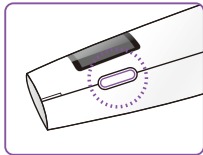

按下電源鍵變更到運行模式

STEP 5



儀器表面需要緊貼肌膚維持
正確的使用方式(參考11P)


STEP 6



按住啟動鍵在照射部位有規
律的移動(按住會連續工作，
鬆開會停止工作)


臉部管理 DUAL Mode時3.0和4.5同時輸出模式, 有更好的效果, 維持時間會更持久

1 臉頰 [上下方向]

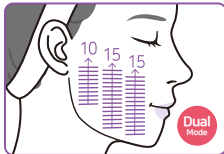


使用Dual Mode 由下至上使用
10次~15次(也可以使用4.5 Mode
或 3.0 Mode)

2 臉頰 [前後方向]

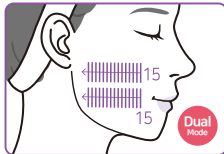

使用Dual Mode由前至後使用
10次~15次(也可以使用4.5 Mode
或 3.0 Mode)

3 臉頰 [對角線方向]

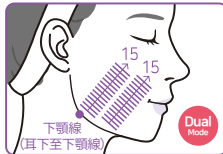

使用Dual Mode由後下向眼下對
角線方向使用 10次~15次(也
可以使用4.5 Mode 或 3.0 Mode)

4 眼睛下部



使用3.0 Mode 在眼下部位左右
各使用10次(注意! 絕對禁止在眼
球部位使用)

5 太陽穴




使用3.0 Mode 橫豎各使用5次
(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)

6 額頭




使用3.0 Mode左右各使用10次
(注意! 眉間禁止使用)

7 雙下巴

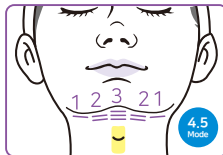

使用4.5 Mode在雙下巴部位使用
1~3次(注意! 避開中間喉結部位)


8 全臉 [眼周能量盒]

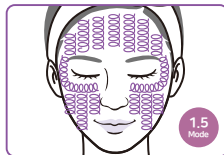

使用1.5 Mode避開禁止使用部位
照射其他全臉部位(5等級 3Hz
基準 1000次 需要大約 6分鐘)


頸部管理

1 頸部 [臉部機頭]

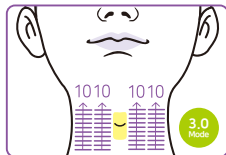

使用3.0 Mode使用10次(注意! 禁止使用在喉結線條部位, 相比皮膚較薄的部位會發紅, 需要適當調節能力強度)

2 頸部 [眼周機頭]

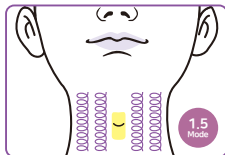

使用1.5 Mode一邊移動一邊使用(5等級 3Hz 基準 500次需要大約3分鐘)(注意! 禁止使用在喉結線條部位, 相比皮膚較薄的部位會發紅, 需要適當調節能力強度)

眼周細紋管理

1 眼睛下部 [臉部機頭]




使用3.0 Mode在眼睛下部左右各照射10次(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)

2 眼周 [眼周機頭]



使用1.5 Mode以眼眶為基準在眼周與太陽穴部位進行均勻使用(5等級 3Hz 基準 各 250次大概需要 1分30秒)

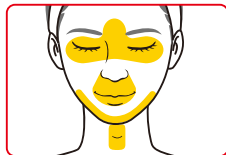


禁止使用區域

眉間, 眼部, 嘴周圍, 下顎線, 喉結線條禁止使用

※ 玻尿酸, 脂肪移植, 線雕部位需要避開使用


※ 在禁止使用區域使用時會有副作用, 制造銷售公司對此不付責任

1 臉頰 [上下方向]

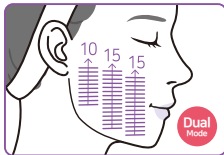

使用Dual Mode 由下至上使用
10次~15次

2 臉頰 [前後方向]

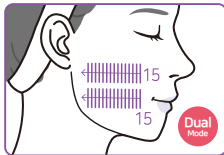

使用Dual Mode由前至後使用
10次~15次

3 太陽穴



使用3.0 Mode 橫豎各使用5次
(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)

4 額頭




使用3.0 Mode左右各使用10次
(注意! 眉間禁止使用)

5 眼睛下部 [臉部機頭]



使用3.0 Mode 在眼下部位左右
各使用10次 (注意! 絕對禁止在眼
球部位使用)

6 全臉 [眼周機頭]

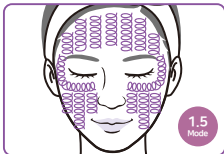


使用1.5 Mode避開禁止使用部位
照射其他全臉部位(5等級 3Hz
基準 1000次 需要大約 6分鐘)
(注意! 參考禁止使用部位)

什麼是DUAL Mode?


是可以同時輸出3.0mm和4.5mm的世界最初雙重超聲波技術, 可以有效的促進膠原蛋白和彈力纖維再生, 增加肌膚彈力改善下垂肌膚, 效果作用於筋膜層 (SMAS) 使用雙重模式可以更好的管理肌膚。

1 臉頰 [上下方向]

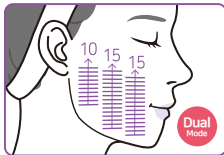


使用Dual Mode 由下至上使用
10次~15次

2 臉頰 [前後方向]

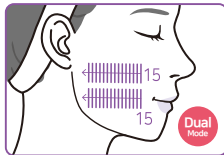


使用Dual Mode由前至後使用
10次~15次

3 臉頰 [對角線方向]

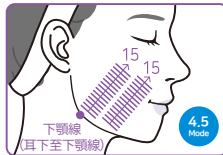


使用4.5 Mode由後下向眼下
對角線方向使用 10次~15次

4 雙下巴

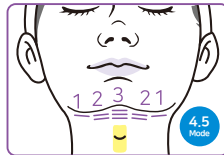

使用4.5 Mode在雙下巴部位使用
1~3次(注意! 避開中間喉結部位)

5 臉頰 [對角線方向]

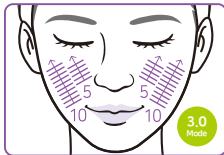

使用3.0 Mode由下至上使用
5次~10次

1 Q. 無法打開電源

A. 確認電量是否充足, 按住產品右側電源鍵3秒以上, 如果還是無法啟動儀器, 請于銷售商聯繫

2 Q. 無法關閉電源

A. 長按電源鍵3秒以上, 如果無法開啟儀器, 嘗試按下產品下端的初始化按鍵(RESET)將儀器初始化

3 Q. 無法充電

A. 嘗試使用其他充電器進行充電, 如果還是無法充電, 請于銷售商聯繫

4 Q. 可以使用其他充電器麼?

A. 可以使用其他Micro 5pin充電器

5 Q. 充電中也可以使用麼?

A. 儀器在充電狀態時會關閉電源轉換成充電模式, 無法再充電時使用本儀器

6 Q. 充滿一次電需要多少時間?

A. 充滿電大約需要2小時30分鐘, 充滿電後可以連續使用1小時30分鐘(根據儀器的狀態會有所差異)

7 Q. 一次需要使用多長時間

A. 大約15分鐘~20分鐘, 參考使用說明書使用

8 Q. 如何使用儀器?

A. 清洗面部後, 去除面部殘餘水分, 充分塗抹保濕凝膠後, 緊貼肌膚使用, 詳細的使用說明請參考使用說明書

9 Q. 電源開啟了, 但是沒有辦法啟動儀器

A. 如果是單純的不能啟動, 可以重啟儀器後進行操作, 其他原因導致的無法啟動儀器, 請于銷售商聯繫

10 Q. 一周可以使用幾次

A. 建議兩周使用一次, 根據肌膚狀態適當調整使用次數 (※ 做全臉時一般使用200~250次左右, 過度使用會因為個人肌膚的薄厚, 產生肌膚變薄(fat reduction)的可能)

11 Q. 想知道剩餘使用次數

A. 進入待機狀態後可以在顯示幕上面查看使用次數和剩餘次數

12 Q. 售后时间是多久?如何申请售后服务

A. 購買後1年內提供免費售後服務(但人為破壞會另外收費)經過1年後會產生維修費用
售後可以通過電話或郵件進行聯繫

13 Q. 更換或退貨如何進行?

A. 如果是符合本公司規定內的故障會進行更換或退貨,除此之外的單純變心或者以其他理由進行更換或退貨時需要和轉銷商進行溝通

14 Q. 主體發熱

A. 有時儀器工作中會有發熱現象,如果儀器過熱可以關閉儀器,等待儀器冷卻之後再進行使用。如果反復連續的出現此現象,請于銷售商聯繫
(過熱的程度會因每個人的感官不同而有所不同)

15 Q. 儀器工作是有噪音

A. 有時儀器再工作中會發出聲音,如果覺得產生的聲音過於嚴重可以停止使用聯繫銷售商
(因每個人對聲音的敏感度不同會有所不同)

16 Q. 可以和其他化妝品一起使用麼?

A. 推薦使用本公司提供的保濕凝膠

17 Q. 模式分為幾種?

A. 臉部機頭有 Dual or 3.0 or 4.5 模式。眼周機頭是1.5 模式

18 Q. 輸出強度有幾種?


A. Dualsonic Professional 1~5等級/
Dualsonic Luxury 1~3等級

19 Q. 會有疼痛感麼?

A. 因每個人對於疼痛的感受會有所不同,使用時可以調節到適合自身的強度

- 20 Q. 使用後如何清洗?
A. 用紙巾或柔軟的布擦拭儀器即可
- 21 Q. 如果確認剩餘電量?
A. 開機後會在顯示幕右上角顯示
- 22 Q. 如何保管儀器
A. 保管在避免直接光線照射的地方
- 23 Q. 可以使用在臉部以外的其他部位麼?
A. 不建議使用在本公司推薦的部位以外的地方
- 24 Q. 懷孕了也可以使用麼?
A. 請參考使用說明書的禁止事項
- 25 Q. 如何初始化?
A. 儀器下端的充電介面旁有一小孔, 按下後可以初始化儀器

- 26 Q. 進入運行模式後只產生了聲音, 儀器沒有正常運行
A. 將機頭于主機分離後, 參考下圖進行調節, 用手按順時針或逆時針方向旋轉。

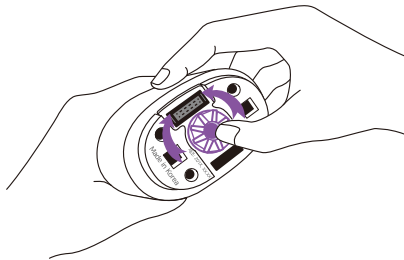

27 Q. DUALSONIC (HIFU) 是什麼儀器？

A. 是將超聲波的能量聚焦在一個點上，瞬間產生熱能，在肌膚的筋膜層 (SMAS) 產生凝固點，可以促進肌膚膠原蛋白和彈力纖維再生，提拉收緊下垂的肌膚，在對肌膚表面不留下傷口的情況下改善肌膚，增加彈力，提拉緊致。

28 Q. DUALSONIC 適用於什麼肌膚

A. DUALSONIC 對於臉部會有很好的提拉緊致的效果，改善皺紋和下垂的肌膚

29 Q. 會影響日常生活麼？


A. DUALSONIC 對肌膚表面不造成任何傷害，可以正常洗臉和化妝，不會影響日常生活

30 Q. 使用後什麼時候可以看到效果

A. DUALSONIC 使用後會直接看到效果，根據不同的肌膚，效果會有所不同

31 Q. 按下啟動鍵也沒有任何反應

A. 在機頭表面塗抹上凝膠後將儀器倒置 (USB 充電埠沖上) 開啟儀器後按下啟動鍵，確認凝膠是否有迸濺，如凝膠迸濺證明儀器可以正常工作，請參考下圖正確使用儀器。儀器末端充電埠向上傾斜 20~160 度時為儀器最佳工作狀態，請按此方向使用儀器並將能量盒表面緊貼肌膚進行使用。
(11P 使用產品時維持正確使用方法)

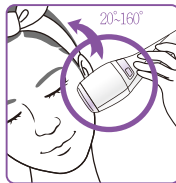

正確的使用方式



錯誤的使用方式

產品名稱：Dualsonic Luxury ☐ Professional ☐

產品編號：

保修範圍和期限

- ▶ 感謝您購買 Jionmeditech 產品。
- ▶ 該產品是通過 Jionmeditech 嚴格的質量控制和檢驗流程創建的。
- ▶ 在正常運輸和使用下, 所有 Jionmeditech 的產品均在購買後一年內免費保修。
- ▶ 在下列情況下, 維修後將收取小額服務費。
 - 1) 保修期內因客戶失誤導致的故障或破損
 - 2) 保修期已過
 - 3) 火災, 地震, 閃電等自然災害造成的故障
 - 4) 產品在安裝或不當操作下的人為損壞
 - 5) 由於 Jionmeditech 指定的人以外的人員進行維修或修改而導致的故障
- ▶ 與產品的主要機能無關的外觀瑕疵或損傷, 並不包括在免費保養內。
- ▶ 對於 Jionmeditech 生產以外的產品 (例如充電器, 電池), 請遵循製造商的保修維修規定。

購買日期：

購買地點：

修理請求要求

- ▶ 如果發生故障, 請停止使用本機並再次檢查本手冊的內容。在維修請求之前關閉產品, 檢查型號名稱,
- ▶ 產品序列號和購買日期, 以聯繫指定的服務中心。

總公司: 韓國京畿道安養市東安區鶴儀路250,403號

TEL : +82-31-8002-0079

FAX : +82-31-360-0811

E-mail : as@jionmeditech.com

Website : www.jionmeditech.com

香港及澳門總代理

環商國際有限公司

網站 : www.globiz.com.hk

電話 : +852 30011212

電郵 : info@globiz.com.hk

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DUALSONIC

Luxury | Professional

JION MEDITECH
www.jionmeditech.com

客戶諮詢



as@jionmeditech.com
+82-31-8002-0079