


DUALSONIC

DUAL Mode 簡易使用介紹

什麼是DUAL Mode? 是可以同時輸出3.0mm和4.5mm的世界最初雙重超聲波技術, 可以有效的促進膠原蛋白和彈力纖維再生, 增加肌膚彈力改善下垂肌膚, 效果作用於筋膜層 (SMAS) 使用雙重模式可以更好的管理肌膚。


1. 臉頰 [上下方向]

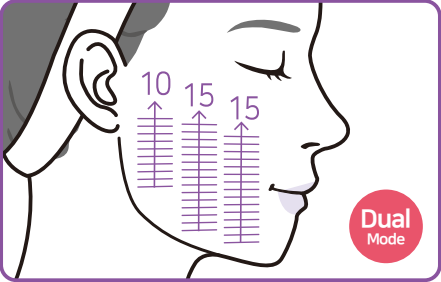

Dual Mode

使用Dual Mode 由下至上使用 10次~15次


2. 臉頰 [前後方向]

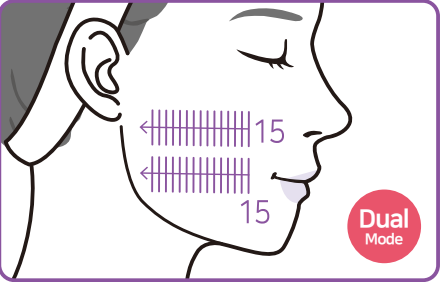

Dual Mode

使用Dual Mode由前至後使用 10次~15次

3. 太陽穴

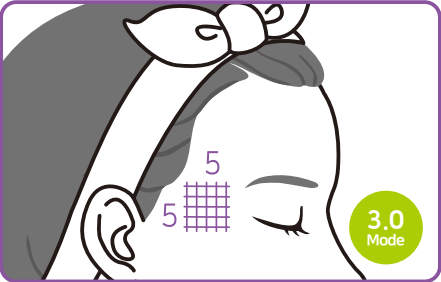

3.0 Mode

使用3.0 Mode 橫豎各使用5次
(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)

4. 額頭



3.0 Mode

使用3.0 Mode左右各使用10次
(注意! 眉間禁止使用)


5. 眼睛下部 [臉部機頭]



3.0 Mode

使用3.0 Mode 在眼下部位左右各使用10次
(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)


6. 全臉 [眼周機頭]

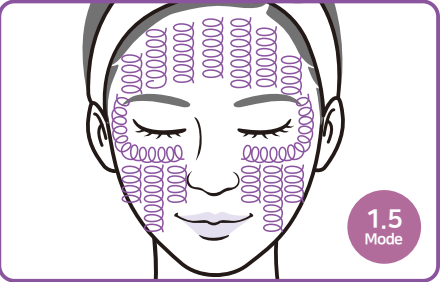

1.5 Mode

使用1.5 Mode避開禁止使用部位照射其他全臉部位
(5等級 3Hz 基準 1000次 需要大約 6分鐘)
(注意! 參考禁止使用部位)

DUALSONIC

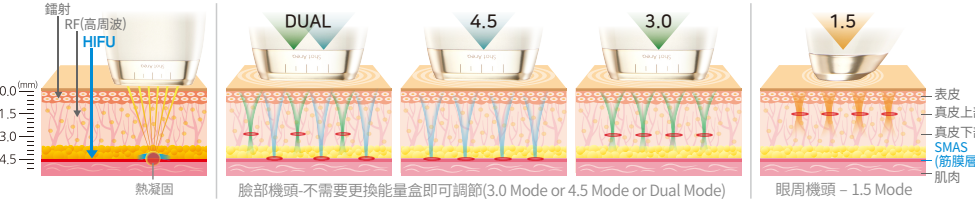

RF(高周波) HIFU

熱凝固

臉部機頭-不需要更換能量盒即可調節(3.0 Mode or 4.5 Mode or Dual Mode)

眼周機頭- 1.5 Mode

表皮
真皮上部
真皮下部
SMAS (筋膜層)
肌肉


不同模式的效果

模式	效果	使用週期
雙重模式	3.0mm和4.5mm同時輸出, 改善皺紋, 增加彈力和提拉緊致效果持久	每2周使用1層 (可根據皮膚狀態調整)
4.5 Mode	肌膚下垂的根本原因是筋膜層 (SMAS) 鬆弛, 本儀器可以直接作用到筋膜層效果持久	
3.0 Mode	熱能會傳遞到真皮層下部, 促進膠原蛋白和彈性纖維再生, 改善皺紋增加肌膚彈力	
1.5 Mode	熱能作用在真皮層上部, 促進膠原蛋白和彈性纖維再生, 改善細紋	

能量調節和模式 (深度/Hz) 調節方法

能量調節和模式 (深度/Hz) 調節方法

1. 能量強度調節方法 (臉部與眼周相同)
短按模式/啟動鍵會在顯示幕上顯示能量強度

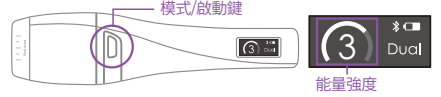


模式/啟動鍵

能量強度

3 Dual

2. 臉部機頭深度 (模式) 調節方法
按住模式/啟動鍵 2秒以上會在顯示幕上顯示模式變更

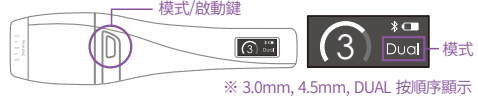


模式/啟動鍵

3 Dual 模式

※ 3.0mm, 4.5mm, DUAL 按順序顯示

3. 眼周機頭照射間隔 (Hz) 調節方法
按住模式/啟動鍵 2秒以上會在顯示幕上顯示Hz(照射間隔)變更

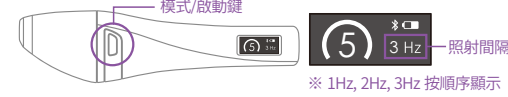

模式/啟動鍵

5 3 Hz 照射間隔

※ 1Hz, 2Hz, 3Hz 按順序顯示

4. 眼周機頭啟動鍵使用方法
使用時按住模式/啟動鍵的情況, 會按在設定好的間隔 (1Hz/2Hz/3Hz) 連續工作, 鬆開模式/啟動鍵會停止工作

※ Hz是 1秒內可以照射的次數(Hz越高照射速度越快)
[Ex. 3Hz→1秒內照射 3次]

※ 注意事項

1. 充分塗抹凝膠後使儀器表面緊貼肌膚, 沒有縫隙的進行使用

2. 眼周機頭使用時為了防止相同位置重複照射, 一定要有規律移動

3. 維持儀器下端沖上進行操作 (參考使用說明書11P)

4. 根據肌膚的敏感度調節適合自己肌膚的強度和模式使用

5. 非防水產品避免在洗臉和沐浴時使用

6. 不要將儀器保管在0°C 以下 50°C以上的地方, 會誘發故障

7. 孕婦或哺乳期內女性/開放性傷口部位不建議使用本產品

8. 有心臟起搏器等移植型的人群和金屬材質植入物的情況不建議使用本產品

9. 使用前請一定要詳細閱讀使用說明書後使用本產品



DUALSONIC
個人使用方法視頻

Make Better Beauty

DUALSONIC

DUALSONIC 使用介紹

世界最初的雙重超聲波專利技術


雙重超聲波專利技術對肌膚表面不會造成任何破壞, 效果直達筋膜層 (SMAS) 可以增加肌膚彈力, 提拉緊致臉型

JION MEDITECH

基本使用介紹


臉部管理 DUAL Mode時3.0和4.5同時輸出模式, 有更好的效果, 維持時間會更持久

1. 臉頰 [上下方向]

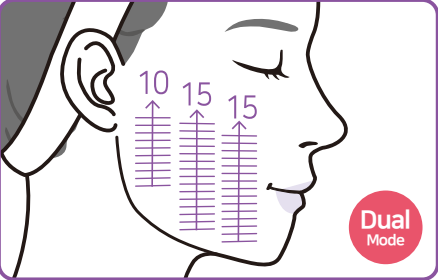


使用Dual Mode 由下至上使用 10次~15次
(也可以使用4.5 Mode 或 3.0 Mode)

2. 臉頰 [前後方向]

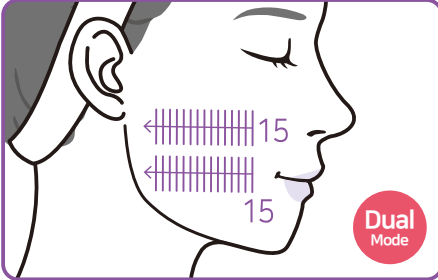


使用Dual Mode由前至後使用 10次~15次
(也可以使用4.5 Mode 或 3.0 Mode)

3. 臉頰 [對角線方向]

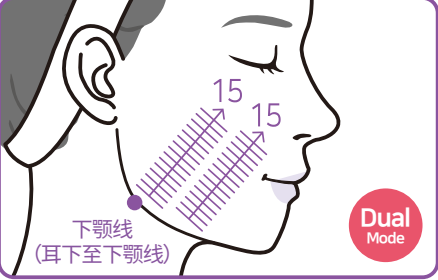

使用Dual Mode由後下向眼下對角線方向使用
10次~15次 (也可以使用4.5 Mode 或 3.0 Mode)

5. 太陽穴

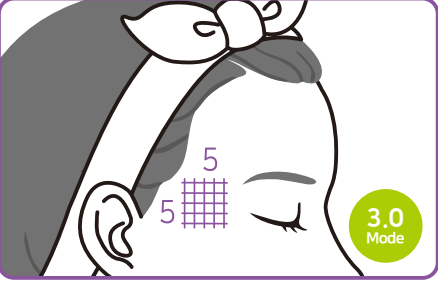


使用3.0 Mode 橫豎各使用5次
(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)

6. 額頭




使用3.0 Mode左右各使用10次
(注意! 眉間禁止使用)

7. 雙下巴

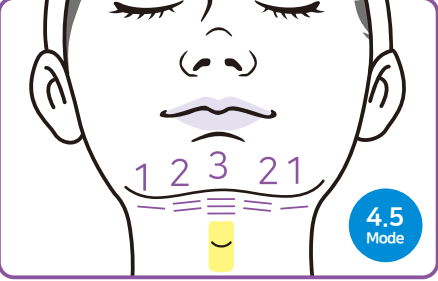

使用4.5 Mode在雙下巴部位使用1~3次
(注意! 避開中間喉結部位)


8. 全臉 [眼周機頭]

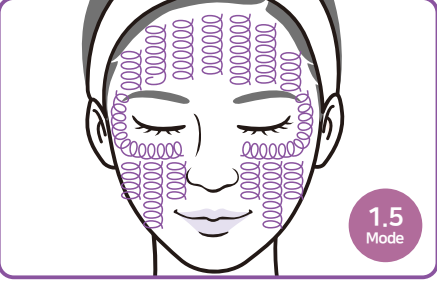

使用1.5 Mode避開禁止使用部位照射其他全臉部位
(5等級 3Hz 基準 1000次 需要大約 6分鐘)
(注意! 參考禁止使用部位)


頸部管理 使用臉部機頭的3.0 Mode和眼周能量盒的 (5等級/3Hz) 集中管理頸部

1. 頸部 [臉部機頭]

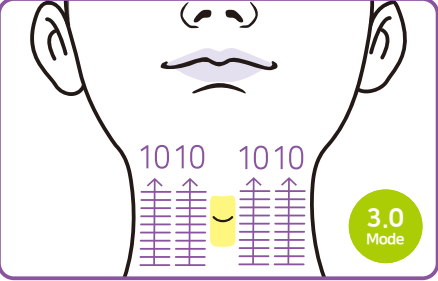

使用3.0 Mode使用10次 (注意! 禁止使用在喉結線
條部位, 相比皮膚較薄的部位會發紅, 需要適當調
節能力強度)

2. 頸部 [眼周機頭]

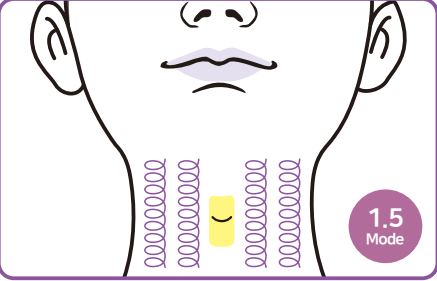

使用1.5 Mode一邊移動一邊使用(5等級 3Hz 基準
500次需要大約3分鐘) (注意! 禁止使用在喉結線
條部位, 相比皮膚較薄的部位會發紅, 需要適當調
節能力強度)


眼周細紋管理 使用臉部機頭的3.0 Mode和眼周機頭的 (5等級/3Hz) 集中管理眼周

1. 眼睛下部 [臉部機頭]



使用3.0 Mode在眼睛下部左右各照射10次
(注意! 絕對禁止在眼球部位使用)

2. 眼周 [眼周機頭]

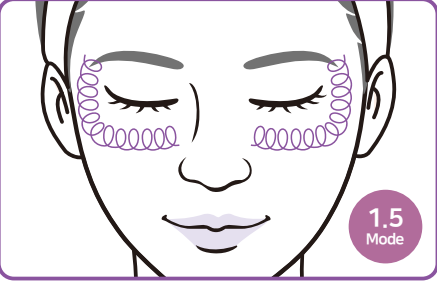

使用1.5 Mode以眼眶為基準在眼周與太陽穴部位
進行均勻使用(5等級 3Hz 基準 各 250次大概需要
1分30秒)


V型臉塑造攻略

1. 臉頰 [上下方向]




使用Dual Mode 由下至上使用 10次~15次

2. 臉頰 [前後方向]

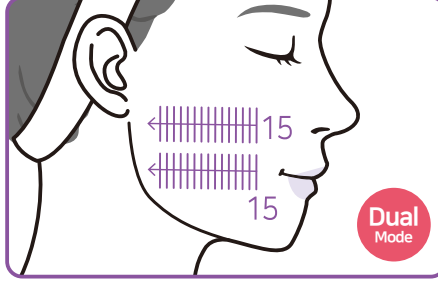


使用Dual Mode由前至後使用 10次~15次

3. 臉頰 [對角線方向]

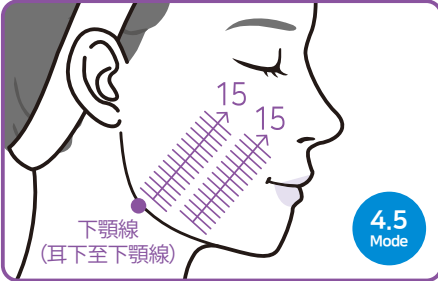


使用4.5 Mode由後下向眼下對角線方向使用
10次~15次

4. 雙下巴

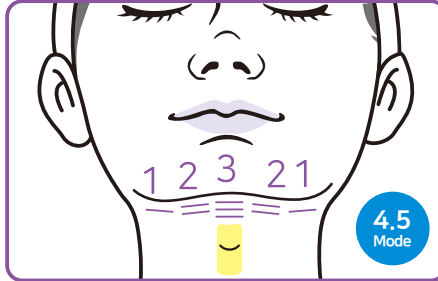

使用4.5 Mode在雙下巴部位使用1~3次
(注意! 避開中間喉結部位)

5. 臉頰 [對角線方向]

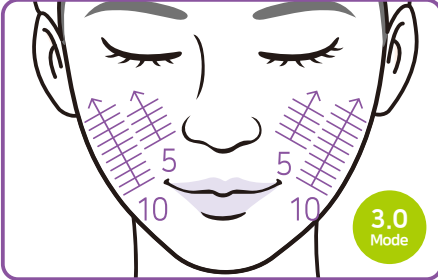

使用3.0 Mode由下至上使用5次~10次

禁止使用區域



眉間, 眼部, 嘴周圍, 下顎線, 喉結線條禁止使用
※ 玻尿酸, 脂肪移植, 線雕部位需要避開使用
※ 在禁止使用區域使用時會有副作用, 制造銷售公司對
此不付責任